

# Die RCN Produktlinie für Kinder



[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)




# Warum RCN?

## Produkte von RCN für Kinder

Gerade Kinder und Jugendliche bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit. Sie benötigen Hilfsmittel, die ihnen und den Menschen, die sie pflegen, das Leben bestmöglich erleichtern.

RCN bietet hier eine breite Palette an Produkten, die perfekt auf diese Bedürfnisse abgestimmt sind. Seit mittlerweile drei Jahrzehnten produzieren wir in unserem Werk in Sargenroth im Hunsrück Pflegehilfsmittel, die sich durch ihre Langlebigkeit, ihre hohe Qualität und ihre leichte Handhabung auszeichnen.

Mit unserer Produktpalette legen wir das Hauptaugenmerk auf das Feld der Körperhygiene. Hier ist oft eine ganz besondere und intensive Unterstützung notwendig, sei es beim Waschen, Duschen, Baden oder bei den Toilettengängen. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien können wir eine lange Lebensdauer sowie absolute Rostfreiheit garantieren.

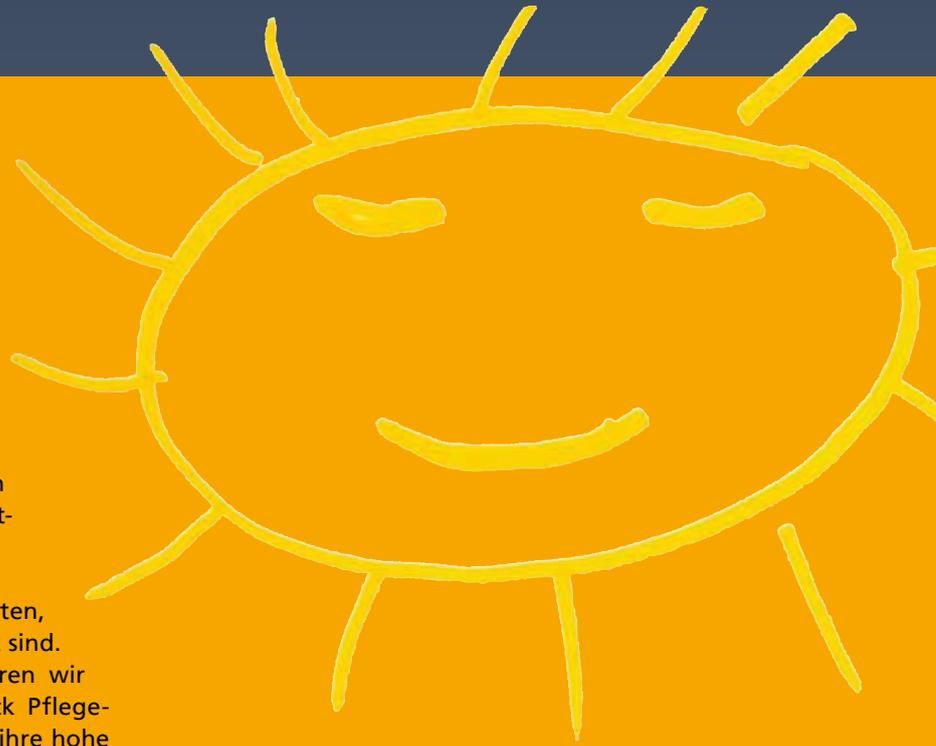

Alle Produkte sind aus unserem RCN Spezialkunststoff hergestellt, der sich der Körpertemperatur schnell anpasst und leicht zu reinigen ist. Zudem halten wir eine Vielzahl an Ausstattungs- und Farboptionen bereit, wodurch die Möglichkeiten der Umsetzung nahezu unbegrenzt sind. Und die für RCN typische Modulbauweise ermöglicht es uns, die Wünsche unserer Kunden ganz individuell umzusetzen.

Sonderwünsche erfüllen wir gerne, sprechen Sie uns an!



# Weil Erfahrung und Qualität zählen.

Sollte also eines unserer Standardprodukte nicht passen, können wir einen detailgenauen angepassten Sonderbau realisieren, der optimal an die Bedürfnisse unsere kleinen Kunden angepasst ist.

Schauen Sie sich unsere Produktinformationen auf den folgenden Seiten an und tauchen Sie ein in die Produktvielfalt von RCN. Sollten Sie Fragen haben oder eine Vor-Ort-Erprobung wünschen, können Sie sich jederzeit mit unserem Innendienstteam oder dem für Sie zuständigen Gebietsverkaufsleiter in Verbindung setzen.

## Unser Vorsprung – Ihr Vorteil

### RCN Produkte sind:

- praxisorientiert und -erprobt
- besonders wartungsfreundlich konstruiert
- als wirtschaftliche Sonderanfertigungen lieferbar
- langlebig und TÜV-geprüft

### Wir bieten:

- kurze Lieferzeiten
- einen hervorragenden Kundenservice
- ein optimales Kosten-Nutzenverhältnis




# Der Dusch- und Toilettenstuhl KSC 180



Der KSC 180, die beste Lösung in den Funktionsbereichen Dusche, Toilette und Transport.

## KSC 180 FT RP SP

- Höhenverstellung: Ermöglicht eine optimale Anpassung der Sitzhöhe an das Wachstum des Kindes (7 Höhen einstellbar), serienmäßig
- Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung
- ausziehbare Fußstütze FT
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- Sitzpolster SP und Rückenpolster RP mit Schaumstoffkern und Bezug aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe
- 4 freidrehende Ø 75 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen mit Feststeller
- Toilettentopf mit Skalierung
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

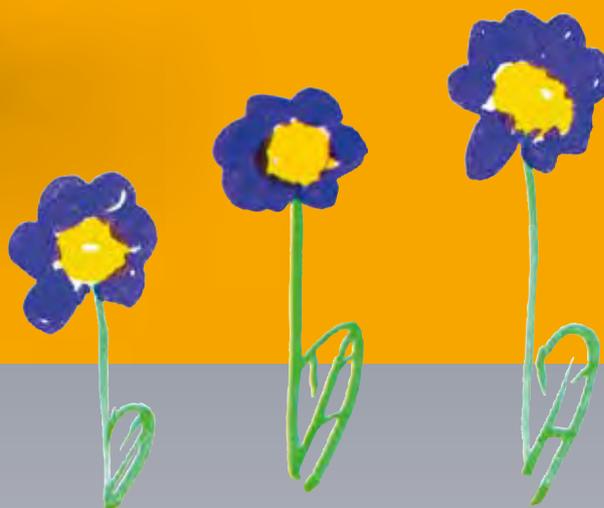

Höhenverstellung der Sitzhöhe per Drehclip von 37,5 bis 52,5 cm

# Optionen für den KSC 180



Rückenpolster mit Schaumstoffkern, Bezug aus Sunsure-Gewebe RP, optional



Sitzplatte mit Polster, Bezug aus Sunsure-Gewebe SP, optional



Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe, standard



Vollkunststoffsitz mit Toilettenöffnung und -topf mit Skalierung, standard



ausziehbare und kippsichere Fußstütze FT, optional



ausschwenkbare Armlehne ASA, optional



Sicherheitsbügel SB, optional

**NEU!**



Optional neuer Polstersitz PPK mit Pflegeöffnung in der Farbe grau erhältlich.

## Farben für Sitzpolster und Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe



weiß



dunkelblau



blau



taubenblau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Max. überfahr-bare Höhe	Belast-barkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe				
KSC 180 FT RP SP	55,5	46	84-99,5	41,5*	35	37,5-52,5*	25-40	29,5-44,5**	150	12,5

\*ohne Polster

Alle Angaben in cm bzw. kg. Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

\*\*Bitte beachten Sie die max. überfahrbare Breite von 34 cm

# Der Kinderrollstuhl DR 400 Mini



## DR 400 Mini SB

Der Kinderrollstuhl für Selbstfahrer

- 22"-Greifreifen
- Armlehnen mit Armpolstern aus PUR-Schaum
- Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern
- Polsterbezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe
- abklappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Sicherheitsbügel SB mit Polster aus PUR-Schaum
- Schiebegriff
- Kleiderschutz beidseitig
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 120 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

## Beinstütze BSM

- Beinstütze BSM optional für DR 400 Mini, 6 Positionen einstellbar

Der DR 400 Mini ist nicht zum Duschen geeignet.

Beschichtetes, dichtes Textilgewebe für Sitz- und Rückenpolster



safran



kirsche



sky



tanne



anthrazit

Polster aus PUR-Schaum für Armlehnen und Sicherheitsbügel



graphit



blau



kobalt

## Beinstütze BSM



Beinstütze verstellbar in 6 Positionen



Sitz- und Rückenpolster mit Schaumstoffkern. Polsterbezüge aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe



Armlehnenpolster aus PUR-Schaum



abklappbare Fußstütze



Kleiderschutz, beidseitig




Feststellbremse, beidseitig



Schiebegriff



Sicherheitsbügel **SB** mit optionalem Polster aus PUR-Schaum, optional

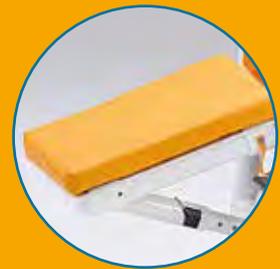

Beinstütze **BSM**, optional

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
DR 400 Mini SB	74	63,5	101	40	36	48	34	120	23

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Der Kinderduschrollstuhl DR 100 Mini S



## Farben für Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe



weiß



dunkel-  
blau



blau



tauben-  
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

## DR 100 Mini S

Der DR 100 Mini S ist das optimale Hilfsmittel für Dusche, Schwimmbad und Hydrotherapie. Er steht sicher auf nassem Untergrund und ist absolut nicht rostend. Er ist damit ideal geeignet für Rehakliniken sowie für Kinder und Jugendliche, die sich unabhängig fortbewegen wollen.

- 22"-Greifreifen
- 2 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen
- Vollkunststoffsitz mit Wasserablaufbohrungen
- Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe
- ausziehbare Fußstütze FT
- beidseitig abnehmbare Armlehnen 2 ASA
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- belastbar bis 120 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen



Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe



Vollkunststoffsitz



pannensichere 22"-Greifreifen



Feststellbremsen, beidseitig



Ø 100 mm freidrehende Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen



ausziehbare Fußstütze FT



beidseitig abnehmbare Armlehne für leichten Transfer, durch Drehclip gesichert 2ASA



Modell	Außenabmessungen			Sitz			Unterschenkel-länge	Belastbar-keit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
DR 100 Mini S	78	64	76	38	36	46,5	29	120	18

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Unser Gehwagen für Kinder



## Farben für Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe



weiß



dunkel-  
blau



blau



tauben-  
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

## GW 120 Mini

Der Gehwagen von RCN ist die besondere Hilfe, die eine Fortbewegung im gesicherten Rahmen ermöglicht und so den Bewegungsdrang der Kinder unterstützt. Die einfach zu handhabende Höhenverstellung ermög-

licht die Nutzung durch Kinder und Jugendliche bis zu einer Körpergröße von 1,55 m. Der Sicherheitsgurt und der Sicherheitsbügel schützen vor ungewollten Stürzen.



Sicherheitsrahmen



Sicherheitsbügel



Sitzpolster aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe



Höhenverstellung, 7 Höhen einstellbar



Tasche



Rückenbespannung aus strapazierfähigem Sunsure-Gewebe



6 Doppelradrollen Ø 75 mm, 4 feststellbar



Fußstütze, verschieb- und abnehmbar GFT, optional



Infusionsflaschenhalter GIH, optional



Gurtpolster GGP, optional



Servierbrett/Therapietisch GSB, optional



Anfahrerschutz aus PUR-Schaum-Polstern AFS, optional

Modell	Außenabmessungen			Sitz			Griffhöhe	Belastbarkeit	Gewicht
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite	Höhe			
GW 120 Mini	89	72	88,5-103,5	26	38,5	39-54	59,5-74,5	150	16

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Die Dusch- und Badeliegen



Stufenlose Positionierung des Fuß- und Rückenteiles



## KDL 100

Die Dusch- und Badeliegen KDL sind das optimale Hilfsmittel zur Nutzung in Badewannen und Duschen. Dabei unterstützen sie bei der Pflege von Kindern, die nicht sitzen können. Die KDL sind sowohl im Rücken- als auch im Beinbereich stufenlos verstellbar und die strapazierfähige Bespannung aus Sunsure-Gewebe ist komfortabel, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Sie passt sich schnell der Körpertemperatur an und wirkt so unterstützend für eine angenehme Pflege.

- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- stufenlos verstellbares Fuß- und Rückenteil
- robuste Bespannung aus Sunsure-Gewebe
- absolut nicht rostend
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen

### Farben für Bespannung Sunsure-Gewebe



weiß



dunkel-  
blau



blau



tauben-  
blau



altrosa



laguna



gelb



konfetti

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Rückenteil	Sitzfläche	Fußteil		
KDL 100	110	48,5	27	40	40	30	75	7
KDL 200	140	48,5	27	50	50	40	100	9

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

## UDL 500

Die RCN Duschiengen können sowohl zum Duschen als auch zum Baden von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden.

Der Rahmen aus RCN Spezialkunststoff garantiert ein geringes Eigengewicht und eine lange Lebensdauer. Die gepolsterte Duschwanne bietet einen hohen Liegekomfort, ist leicht zu reinigen und desinfizierbar. In Verbindung mit dem verschließbaren Ablauf, kann die Wanne mit Wasser befüllt werden.

- gepolsterte Wanne
- abklappbare Seitenlehnen
- Ablauf mit Schlauch
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- garantiert nicht rostend
- 4 freidrehende Kunststoff-Edelstahl-Einradrollen mit Feststeller
- belastbar bis 150 kg
- bis Körpergröße 146 cm
- bis Schulterbreite 48 cm
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen




90 cm langer Ablaufschlauch



verschließbarer Ablauf zum Befüllen der Wanne



6-fach verstellbares Rückenteil VR, optional

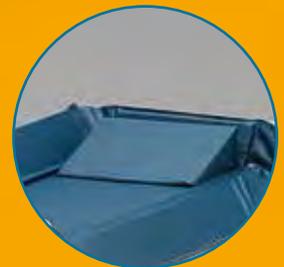

Keilkissen DK, optional



abklappbare Seitenlehnen

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDL 500	164	75	96	146	48	80	150	41
UDL 750	180	80	96	162	53	80	150	46

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Die höhenverstellbaren Duschliegen

## Die Modellreihe UDW

Die Duschliegen UDW sind die besonderen Hilfsmittel zum Duschen und Transportieren von Pflegebedürftigen. Über die beidseitigen Fußpedale ist die Höhe der Liegefläche von 49 bis 89 cm stufenlos hydraulisch verstellbar. Die gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort, ist leicht zu reinigen und desinfizierbar. Die Fuß- und Seitenlehnen sind komplett abklappbar und erleichtern dadurch die Umlagerung. Die Liege-

fläche kann durch die umlegbare Kopflehne um 15 cm verlängert und die Neigung der Liegefläche durch eine Gasdruckfeder positiv und negativ bis zu einer Anti-/Trendelenburg-Lagerung eingestellt werden. Der verschließbare Ablauf in Verbindung mit einem 90 cm langen Schlauch gewährleistet einen kontrollierten Wasserablauf.

- gepolsterte Wanne
- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung per Gasdruckfeder
- stufenlos hydraulische Höhenverstellung von 49 - 89 cm über beidseitige Fußpedale
- verschließ- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch
- pulverbeschichteter Edelstahlrahmen
- belastbar bis 150 kg
- bis Körpergröße 162 cm (177 cm bei umgelegter Kopflehne)
- bis Schulterbreite 54 cm
- 8 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen (4 mit Feststeller)
- absolut nicht rostend
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Edelstahlrahmen



abgebildet UDW 650

Abklappbare Fuß- und Seitenlehnen und umlegbare Kopflehne



Höhenverstellung von 49 bis 89 cm

Anti-/Trendelenburg-Lagerung

abklappbare Fuß- und Seitenlehnen

gepolsterte Duschwanne

umlegbare Kopflehne, wodurch die Liegefläche um 15 cm verlängert werden kann

pulverbeschichteter Edelstahlrahmen

Kurbel für stufenloses Anheben des Rückenteils **VRW**, optional

Gasdruckfeder zur Anti-/Trendelenburg-Lagerung

Hydraulikzylinder für eine einfache Höhenverstellung und eine belastungsunabhängige Absenkgeschwindigkeit

Ablauf mit Schlauch

beidseitig Fußpedale für hydraulische Höhenverstellung

Ø 100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Totalfeststeller

Garantiert nicht rostend!



abgebildet **UDW 650 VRW**

verstellbares Rückenteil **VRW**, optional

Modell	Außenabmessungen			Liegefläche			Belastbarkeit	Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	bis Körperlänge	bis Schulterbreite	Höhe		
UDW 650	177	71	70-110	162/177*	54	49-89	150	69
UDW 650 VRW	177	71	70-110	162/177*	54	49-89	150	69

Alle Angaben in cm bzw. kg.

\*bei umgelegter Kopflehne

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Die Wickelkommode WK 07



Die Babybadewanne **BWR 200** ist bei der Wickelkommode WK 07 serienmäßig enthalten.

## WK 07

Die fahrbare Wickelkommode WK 07 erleichtert die Pflege von Babys erheblich. Die gepolsterte Wickelfläche hat eine angenehme Arbeitshöhe von 97 cm und kann auf Wunsch angepasst werden. In der seitlichen Korpus-einheit finden Sie ausreichend Platz für alle nötigen

Pflegeutensilien und in Verbindung mit der fahrbaren Babybadewanne haben Sie immer alles in Reichweite. Die verwendeten Materialien sind alle Urin-, Blut- und desinfektionsmittelbeständig.



# Das Beste für die Kleinen

## WK 07

- Rahmen aus stabilem, UV- und desinfektionsmittelbeständigem RCN-Spezialkunststoff-Rahmen
- gepolsterte Wickelauflage (30 mm Schaumstofffüllung) mit 3-seitig gepolsterter Reling
- Korpuseinheit mit einem offenen Fach und zwei Schubladen aus hochwertigen RESOPAL®-HPL-Platten
- 6 x Ø 75 mm Doppellaufrollen, 4 mit Feststeller

- 4 x Ø 75 mm Doppellaufrollen, feststellbar
- absolut nicht rostend
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen


mit BWR 200:

- fahrbare Babybadewanne
- Rahmen aus RCN Spezialkunststoff
- Wanne in Hellblau oder Grau mit ca. 840 mm langem Ablaufschlauch



Die fahrbare Babybadewanne kann platzsparend unter der Wickelkommode verstaut werden.

Farben für Wanne:

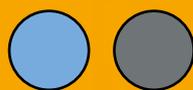

hellblau grau



Die BWR 200 können Sie auch einzeln ohne die Wickelkommode erwerben.

Farben für Wickelauflage Polster:



safran kirsche sky tanne anthrazit

Farben für Korpus:



laubgrün enzian blau signal rot clementine orange ginster gelb alabaster frost weiß

Modell: WK 07	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Außenabmessungen	101	86	117	74
Wickelfläche	82,5	76	97*	-
Schubladen Innenmaße	24	58	16	-
BWR 200	77,5	45,5	87,5	8,6

\*Oberkante Wickelauflage unbelastet

Alle Angaben in cm bzw. kg. Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Die Wickelkommode WK 07 mit Wärmestrahler

## Die RCN Wickelkommode WK 07 WL

Der Wärmestrahler IW 980 AGU wurde speziell für eine geregelte Wärmezufuhr entwickelt. Er schützt die Babys vor dem Auskühlen und sorgt für die Aufrechterhaltung der richtigen Körpertemperatur.

In Verbindung mit dem Hauttemperatursensor gewährleistet der Wärmestrahler eine gleichbleibende Hauttemperatur, indem die Heizleistung automatisch den physiologischen und den Umgebungsbedingungen angepasst wird. Dies geschieht mittel eines Mikroprozessors, der die Hauttemperatur 10 Mal pro Sekunde misst. So sind Babys beim Wickeln und Pflegen wesentlich entspannter und fühlen sich wohler.



Wärmestrahler seitlich  
wegschwenkbar



## WK 07 WL

Ausstattung und Merkmale wie bei WK 07  
zusätzlich mit:

- geprüftem Halter für Wärmestrahler
- Wärmestrahler IW 980 AGU
- Hauttemperatursteuerung
- DuoSense Hauttemperatursensor
- SunSpot Sensorschutz
- Infusionshaken

# Kinder wollen in die Natur



## Das Strandmobil SM 700 FBS

Das Strandmobil SM 700 FBS aus weißem Spezialkunststoff – bruch-sicher, absolut rostfrei, UV-beständig – kann dank seiner großen Niederdruck-Ballonreifen überall dort gefahren werden, wo der weiche oder unebene Untergrund normale Rollstühle vor unlös-bare Probleme stellt.

Die atmungsaktiven Sitz- und Rückenpolster ermöglichen auch an sonnigen und heißen Tagen einen unbeschwerten Aufent-halt im Strandmobil. Für den Transport lässt sich der Sitz mit wenigen Handgriffen vom Fahrgestell abheben und separat verstauen. Sinnvolles Zubehör, wie z. B. ein Sonnenschirm und ein einfach über den Armlehnen zu befestigender Sicherheitsbügel runden das Angebot ab.

**Das Strandmobil, ein Hilfsmittel, das ganz neue Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung erschließt.**

- Feststellbremse
- Utensilentasche (nicht abgebildet)
- absolut rostfrei
- meerwasserbeständig
- die Alternative für nicht befestigte Böden und Sandstrände



Optionen:

- Sicherheitsbügel SBS
- Sonnenschirm mit Halter SO

**Farben für Polstersitz und Rückenbespannung aus Sunsure-Gewebe**






weiß    dunkel-blau    blau    tauben-blau    altrosa    laguna    gelb    konfetti

SM 700 FBS	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Gesamtmaße	110	104	111	35

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

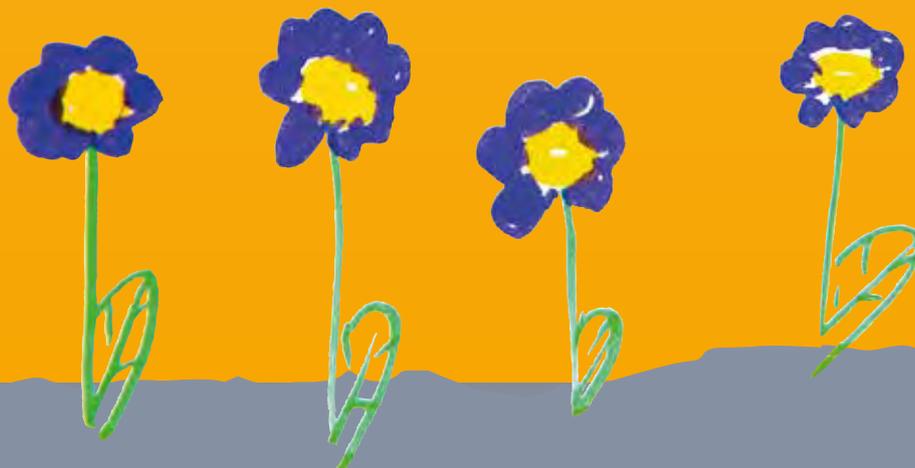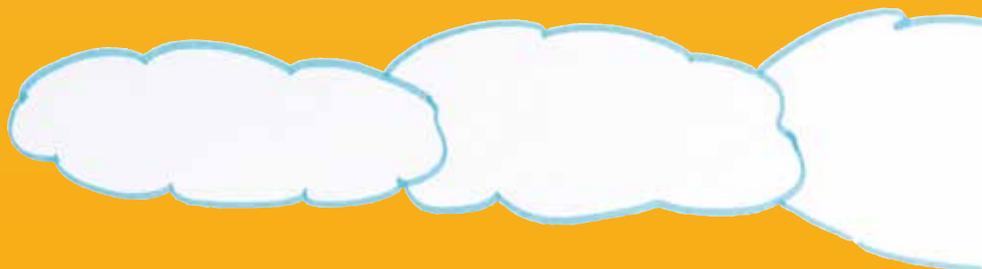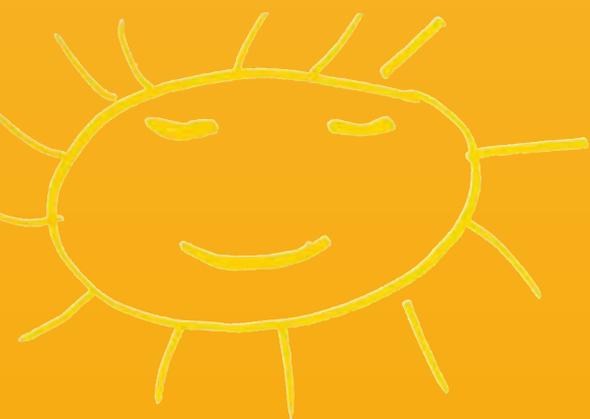

**RCN – die beste Adresse für  
Qualität, Funktionalität und Service!**

**RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · [info@rcn-medizin.de](mailto:info@rcn-medizin.de)

[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)

Stand 06/2023

